




Free Total

AquaSnap™ | 水样 ATP 检测拭子

AquaSnap 是配合 Hygiena 各种荧光仪使用的水样检测拭子，操作简便，有两种型号：Free 和 Total。AquaSnap Free 测量的是溶液中游离的 ATP（非微生物 ATP），AquaSnap Total 测量的是溶液中游离的和微生物 ATP 的总量。这两种类型是样品中微生物污染的不同检测方法，其特点是具有定量采集 100 μ l 水样的吸头，能够保证采集量的一致性。检测拭子中含有独特的液态稳定试剂，配合简易的结构设计能够提供无与伦比的精确性和可重复性。此拭子经常用于 CIP 系统、水处理系统如冷却塔和封闭式水系统等的管理。

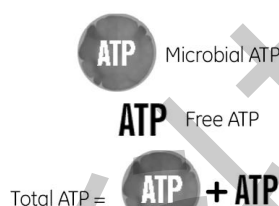


优势:

- 使用简便。
- 结果 15 秒可得。
- 专利设计的 Snap-Valve™ 折断阀保证结果的准确、变量小。
- 独特的液态稳定试剂结果准确、具有可重复性。
- 试剂不受温度和消毒剂的影响。
- 蜂窝状拭子头采集样品量保持一致为 100 μ l。
- 塑料 100% 回收。
- 冷藏温度 (2-8°C) 下有效期为 12 个月。
- 室温 (21-25°C) 下保存有效期为 4 周。


灵敏度:

- 灵敏度极高：使用 EnSURE 荧光仪，检测下限为 0.5 femtomoles ATP。
- 检测下限 103 CFU。

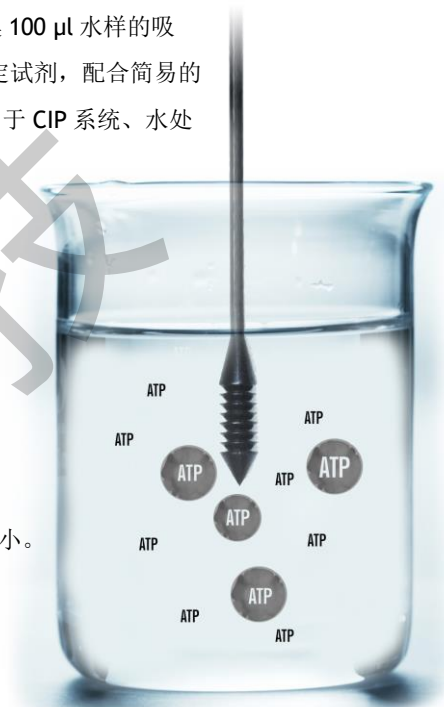

货号	说明	数量
AQ-100X	AquaSnap Total	100
AQ-100FX	AquaSnap Free	100

AquaSnap 检测程序:

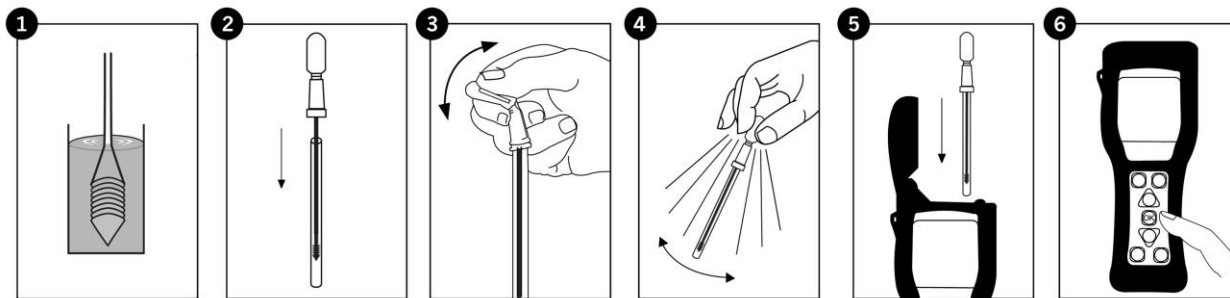

相关产品:



EnSURE

EnSURE 是一款高灵敏荧光仪，能够在同一台仪器进行多重质量检测，如 ATP、菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌等等。此荧光仪包含 SureTrend 数据跟踪软件。



SystemSURE Plus

SystemSURE Plus 用于 ATP 卫生监控。此款仪器手掌大小、便于操作、灵敏度高、价格合理，用户能够快速判断环境表面的清洁效果 and 水的卫生状况，从而保证产品质量并降低成本。



UltraSnap & SuperSnap

UltraSnap 检测的是表面的 ATP。SuperSnap 是 Hygiena 公司最灵敏的 ATP 表面检测拭子。两款拭子能够配合所有 Hygiena 公司的荧光仪使用。UltraSnap 和 SuperSnap 均为一体化检测拭子，能够检测极低水平的 ATP。



MicroSnap 指标生物检测

MicroSnap 是用于特定细菌检测和计数的快速方法。检测结果 8 小时内可得, with single figure organism detection in 8 hours, enabling results in the same working day or shift. MicroSnap is available in four formats: TVC, Enterobacteriaceae, Coliform, and E. Coli.

货号		数量
ENSURE	EnSURE 监控系统, 配有 SureTrend 软件	1
SS3	SystemSURE Plus ATP 监控系统, 配有 SureTrend 软件	1
US2020	UltraSnap 表面 ATP 检测	100
SUS3000	SuperSnap 高灵敏 ATP 检测	100
见目录	MicroSnap 细菌总数	100
见目录	MicroSnap 大肠菌群	100
见目录	MicroSnap 大肠杆菌	100
见目录	MicroSnap 肠杆菌科	100